

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

© 2001-2009, Datec
Correspondentie richten aan:
Datec
Torenwacht 31
2353 DB Leiderdorp
Nederland
Tel: 071-5890056
Fax: 071-5238607
E-mail: info@datec.nl
Internet: www.datec.nl
Document versie: 20090924

DATEC

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Inhoud

1	Starten met Datec Score Manager	4
1.1	Welkom bij Datec Score Manager Versie 3	4
1.2	Wat is nieuw in Versie 3 van Datec Score Manager	5
	Internet Afnames	5
	Importeren cliënt gegevens	5
	Burger Service Nummer	5
1.3	Datec Score Manager Professional	5
	Behandelplannen met een druk op de knop	6
	Rapportage aanpassen naar behoefte	6
	Normgroepen samenstellen	6
	Testbatterijen zelf samenstellen	7
	Extra velden voor Cliënt gegevens	8
1.4	Gebruik van Hulp in Datec Score Manager	8
	Online hulp	8
1.5	Rondleiding langs de belangrijkste functies	8
	Rondleiding: Beginnen met Datec Score Manager	8
	Rondleiding: Test klaarzetten	10
	Rondleiding: Test Achter de PC Invullen	11
	Rondleiding: Internet afname	12
	Rondleiding: Rapport bekijken	14
2	Beheer	15
2.1	Overzicht	15
	Bronnen	15
	Database Opschonen	15
	Portefeuille	15
2.2	Test Beheer	16
2.3	Beheer: Database Opschonen	17
	Gegevens beveiliging	17
	Gegevens zekerstellen (Backup)	18
2.4	Portefeuille	18
	Overzicht Portefeuille	18
	Portefeuille - Product tab	20
	Portefeuille - Prijzen Tab	20
	Portefeuille - Gebruik Tab	21

Portefeuille - Bestel Wizard Tab	21
Klaarzetten en versturen via Internet	22
Klaarzetten en zelf versturen via email.	22
(Automatisch) Verzenden gegevens	22
Portefeuille - Ontvang Tab	23
Ophalen via Internet:	23
Ophalen Email of Floppy bestand:	23
3 Installatie van Datec Score Manager.....	24
3.1 Installatie vereisten.	24
3.2 Upgrade van Datec Score Manager versie 3.....	25
3.3 Standalone Installatie.....	25
Standalone installatie van Datec Score Manager	25
Standalone installatie van Datec Score Manager	26
Plaats van de bestanden	27
3.4 Netwerk of Citrix Installatie.....	28
Netwerk Installatie	28
Netwerk Installatie	29
Installatie van Server Componenten	29
Installatie van de Desktop Componenten	30
Windows Beveiligde Omgeving	31
3.5 Licenties.....	31
3.6 Datec Score Manager voor de eerste keer starten	31
Beheerder.....	32
Registratie/Laden	32

1 Starten met Datec Score Manager

1.1 Welkom bij Datec Score Manager Versie 3

Datec Score Manager is gemaakt voor het afnemen van vragenlijsten en andere tests. U kunt een vragenlijst af laten nemen met pen & papier, en de antwoorden razendsnel overnemen met de pen & papier module. Of kunt een test door de cliënt achter de PC laten afnemen met behulp van Datec Score Manager of met een Internet browser op iedere willekeurige plaats.

Na het afnemen van een test is de Datec Score Manager stelt het programma een persoonlijk rapport op waarin de individuele resultaten worden gepresenteerd. Het rapport kunt u afdrukken of direct overnemen in uw word processor.

Met behulp van de ondersteuning voor behandelplannen, kunt u, na het stellen van de diagnose snel een behandelplan opnemen in uw rapport. Standaard zijn er al meer dan 200 plannen meegeleverd, maar u kunt de plannen ook aanpassen aan de standaards binnen uw eigen organisatie

Het programma is ontworpen voor eenvoudig en snel gebruik. Er zijn echter zeer veel mogelijkheden, dus het is aanbevolen van tijd tot tijd deze online hulp te bekijken.

1.2 Wat is nieuw in Versie 3 van Datec Score Manager

Internet Afnames

Versie 3 introduceert Internet afnames. Datec Score Manager is het meest veelzijdige test programma, u kunt test afnemen op alle mogelijke manieren:

- Via Internet. De cliënt krijgt een inlog naam en code en logt veilig in op een willekeurige PC, binnen uw instelling of thuis. Het enige wat daarvoor nodig is, is een moderne browser. U krijgt de resultaten en kunt de uitgebreide rapportage opstellen binnen Datec Score Manager
- Achter de PC. U logt zelf in of geeft de cliënt een inlogcode. De cliënt neemt de test af met behulp van Datec Score Manager.
- Schriftelijk via een door Datec Score Manager opgestelde lijst. U drukt de vragenlijst voor de cliënt af met behulp van het programma, de cliënt vult die in en u neemt de vragen over met behulp van de snelle P&P module (één toetsaanslag per antwoord).
- Schriftelijk met aangeschafte lijsten. U koopt een gedrukte vragenlijst en laat die door de cliënt invullen. U neemt de antwoorden over met behulp van de snelle P&P module (één toetsaanslag per antwoord).

Importeren cliënt gegevens.

U kunt cliënt gegevens automatisch importeren uit een CSV bestand, bijvoorbeeld uit uw administratie. Veel administratie programma's hebben een knop waarmee de gegevens automatisch kunnen worden overgedragen.

Ook kunt u kiezen of een of meer tests automatisch moeten worden klaargezet bij de import, en of de test op Internet wordt afgenomen. Bij afname via Internet krijgen alle cliënten waarvan de gegevens zijn geïmporteerd automatisch een email met de uitnodiging. Vraag Datec naar het document met instructies hierover. Of vraag ons u te helpen.

Burger Service Nummer

In versie 3 is het veld BSN toegevoegd bij de cliënt gegevens. Hier kunt u het Burger Service Nummer van de cliënt noteren, voor koppeling aan uw administratie.

1.3 Datec Score Manager Professional

Behandelplannen met een druk op de knop, zelf samenstellen van tests en rapporten. Gebruik van uw eigen logo in rapporten. Uitgebreide

ondersteuning van onderzoek, met normen vergeleken met eigen samengestelde groepen, ondersteuning van SPSS, en een Norm Wizard voor het berekenen van norm tabellen over uw eigen test populatie. Ook kunt u eigen velden definiëren, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het vastleggen van achtergrond variabelen bij uw cliënt populatie.

Behandelplannen met een druk op de knop

De nieuwe behandelplan functie stelt u in staat om met een druk op de knop een behandelplan in de rapporten op te nemen. U eenvoudig de teksten aanpassen aan de standaards binnen uw organisatie.

- Meer dan 100 teksten voor behandelplannen zijn reeds meegeleverd, voor meer dan 20 diagnoses, zoals depressie, fobiën, ADHD, Persoonlijkheids stoornissen Cluster A, B en C en vele anderen.
- Na het stellen van de diagnose geeft u de diagnose en het plan aan in de Notitie voor de cliënt. De bij het plan behorende tekst wordt in het test rapport, of naar keuze, in een cliënt rapport afgedrukt.
- Met Beheer, Behandelplannen kunt u plannen wijzigen, verwijderen, hernoemen of toevoegen. Ook kunt u de diagnoses wijzigen. Ieder behandelplan kan in een of meerdere diagnoses voorkomen.
- In de behandelplannen kunt u ook variabele velden opnemen, zoals de naam van de cliënt, de leeftijd, of andere gegevens.

Rapportage aanpassen naar behoefte

Eigen rapporten samenstellen, bedrijfslogo's opnemen in uw rapporten, of de rapporten aanpassen aan uw voorkeur

- U kunt de rapporten aanpassen aan uw eisen of zelf andere rapporten samenstellen. Een rapport bestaat uit onderdelen, zoals de persoonlijke informatie, de score tabel, de norm grafiek, persoonlijke teksten, etc. U kunt aangeven in welke volgorde de door u gewenste onderdelen worden opgenomen in het rapport.
- U kunt uw eigen bedrijfslogo of tekst opnemen in de kop van het rapport. Ook kunt u eigen vaste tekst opnemen in het rapport.

Normgroepen samenstellen

Ongekende mogelijkheden voor berekeningen van normen over uw eigen test database. Datec Score Manager Professional ondersteunt uw onderzoek.

- U kunt zelf groepen definiëren, en cliënten indelen in groepen. Bij het opstellen van een rapport kunt u de cliënt vergelijken met de andere leden van de groep. Datec Score Manager Professional rekent direct de normering uit voor de groep, en stelt het rapport op aan de hand van de berekende norm. Hierbij wordt de cliënt dus vergeleken met een door u gekozen groep andere cliënten.
- Met behulp van de Norm Wizard, een apart onderdeel bij Datec Score Manager Professional, kunt u zelf normgroepen samenstellen over de populatie in uw eigen database. U kunt kiezen tussen een totale normgroep en/of een normgroep opgesplitst naar geslacht. De Wizard berekent de norm tabel over de tests van uw cliënten, en schrijft die weg in de database. De opgestelde normen krijgen automatisch het juiste normtype (7 punts schaal, percentiel, deciel, etc) zoals bepaald door de auteur van de test. De wizard stel uitgebreide rapportage over de normtabellen voor u op. Hierna kunt u deze normgroep kiezen bij het opstellen van een test rapport.
- U kunt de resultaten van uw tests wegschrijven in een tekst bestand. Dit bestand kunt u inlezen in bijvoorbeeld SPSS of Microsoft Excel, voor verdere bewerking van de gegevens. Tip: indien u onderzoek doet kan het bepalen van een eigen normgroep, of het wegschrijven van de test gegevens zonder dat u de test rapporten hoeft op te vragen.

Testbatterijen zelf samenstellen

Zelf testen combineren tot een nieuwe samengestelde test. Of onderdelen van tests samenvoegen tot een nieuwe praktijkgericht test.

- In de Professional versie kunt u tests samenvoegen tot een standaard testbatterij. In plaats van losse tests met iedere hun eigen rapport, kan een samengestelde testbatterij als één test met doorlopende item nummering worden aangeboden.
- Samengestelde tests kunnen worden afgedrukt of achter het scherm worden afgenomen. De bij iedere afzonderlijke tests behorende instructie worden automatisch voorafgaand aan het test onderdeel aan de gebruiker getoond.
- Een bij de samengestelde test behorend rapport wordt automatisch voor u aangemaakt. De resultaten van de verschillende tests worden na elkaar in één rapport getoond.

Extra velden voor Cliënt gegevens

- U kunt tot 10 extra velden definiëren, die per cliënt kunnen worden vastgelegd. De test leider krijgt deze extra velden te zien onder de knop "Extra" in de cliënt gegevens dialoog. Per veld kunt u definiëren of dit bij de export van test gegevens naar een tekst bestand moet worden opgenomen of niet.

1.4 Gebruik van Hulp in Datec Score Manager

Er zijn verschillende manieren om hulp te krijgen bij het gebruik van de Datec Score Manager.

Online hulp

Druk op **Hulp, Inhoud** om deze help op te starten. U komt dan in het hoofdmenu terecht. Vanuit de verschillende dialogen kunt u ook op de **Hulp** knop drukken. U komt dan ook in de hulp bibliotheek, maar direct op een relevante pagina met informatie over de dialoog waar u mee bezig bent.

Het linker gedeelte van het scherm laat altijd de volledige inhoud van de hulp bibliotheek zien. U kunt daarmee beslissen of er nog meer informatie staat die voor u relevant is.

Met de **Index** tab kunt u een sleutelwoord ingegeven, waarna u rechtstreeks naar de meest relevante pagina kunt gaan met betrekking tot dit sleutel woord.

Met de **Zoeken** tab kunt u zoeken naar een willekeurig woord. Iedere pagina waar dat woord in voorkomt wordt u gepresenteerd.

Met de **Favorieten** tab kunt u net als in de Internet browser een pagina oormerken. Als u een bepaalde help pagina later makkelijk wilt terug vinden, ga dan naar de Favorieten tab en voeg de pagina toe aan de favorieten.

1.5 Rondleiding langs de belangrijkste functies

Rondleiding: Beginnen met Datec Score Manager

Na het inloggen in het programma en eventueel wijzigen van het wachtwoord wordt het hoofdvenster zichtbaar. Het is aan te raden bij het eerste gebruik het scherm wat groter te zetten als uw scherm dat toelaat. Het programma onthoudt de scherm settings, dus de volgende keer wordt het scherm weer net zo.

In de menubalk zijn nog niet alle functies beschikbaar, net als in de knoppenbalk. De knoppen en menu's zijn alleen beschikbaar als ze van toepassing zijn. Zo kunt u alleen een rapport maken als u eerst een test hebt ingevuld.




Via de knoppen krijgt u een standaard keuze. Via het menu heeft u meer keuzes (bijvoorbeeld welk rapport u wil). De knoppenbalk is steeds van toepassing op de geselecteerde test sessie.

Door de muisaanwijzer boven een knop te zetten, wordt zichtbaar wat er opgestart kan worden via die knop.



Na het inloggen zijn alleen de routines "Nieuwe cliënt" en "Toon alle test gegevens" beschikbaar via de knoppenbalk. Afhankelijk van uw gebruiksrechten is ook "Vinden" beschikbaar.

Onderaan is een status-balk. Daarin kan een aanwijzing gevonden worden voor wat er verder moet gebeuren, maar ook bepaalde gegevens die van belang kunnen zijn voor het gebruik, bijvoorbeeld de cliënt en test waarmee het programma nu werkt.

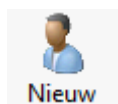

Met behulp van **Cliënt, Nieuwe...** of met behulp van de **Nieuw** knop kunt u nieuwe cliënt gegevens invoeren.

Hierna ziet de knoppenbalk er als volgt uit:





Toon Tests Standaard ziet u onder de knoppen balk een duin landschap. Dit is gedaan om de gegevens van uw cliënten te verbergen, wanneer er mogelijk anderen met u meekijken. U kunt de gegevens tonen met de menu keuze **Tests, Toon Alle...** of door de **Toon Tests** knop in te drukken.

In dit overzicht ziet u alle cliënten, en wanneer van toepassing, al hun test sessies. Op iedere regel worden de belangrijkste cliënt gegevens herhaald, en daarnaast wordt informatie over de test sessie getoond. Indien er geen test sessie voor een cliënt is klaargezet, blijft dit gedeelte leeg.

Indien meerdere cliënten ingevoerd zijn, dan kan een cliënt gekozen worden door op de betreffende regel te klikken. In de statusbalk wordt vermeld welke cliënt gekozen is.

Rondleiding: Test klaarzetten

Het werken met Datec Score Manager bestaat uit de volgende stappen:

1. Invoeren van de cliënt gegevens
2. Klaarzetten van een test (of meerdere tests)
3. Invullen van de vragenlijst, dit kan [online](#), of [schriftelijk](#).
4. Opvragen van de rapportage.


Wanneer u net de cliënt gegevens hebt ingevoerd, is de cliënt nog geselecteerd. Als u een andere cliënt wilt selecteren kunt u op een van de regels van die cliënt in het overzicht klikken.



Klaarzetten Druk op **Klaarzetten** of selecteer het menu **Tests, Test klaar zetten...** om een test klaar te zetten.

In de dialoog geeft u aan welke test moet worden afgenomen, wat de verwachte test datum is, en kiest u eventueel de norm groep en het rapport. De keuze voor de norm groep en het rapport kunt u later nog wijzigen.

Na het afsluiten van de Test keuze dialoog ziet de status balk er als volgt uit:

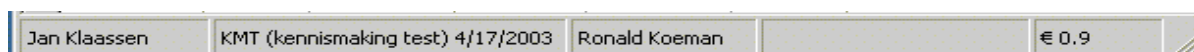

Het eerste veld is de cliënt naam, de tweede de naam van de test sessie, de derde geeft de naam van de testleider weer. Het laatste veld toont de inhoud van de portefeuille in Euro's.

Na het klaarzetten kan de test achter de PC worden ingevuld of via Internet worden afgenomen.

Rondleiding: Test Achter de PC Invullen

Als u net de een test hebt klaargezet deze nog geselecteerd. Selecteer anders een test door op de regel met de juiste test te klikken.



Met de knop **Afname** kunt u de afname van de geselecteerde test starten.

Met de menukeuze **Test, Achter PC Afnemen....** krijgt u eerst een dialoog wordt getoond waarbij alle tests die zijn klaargezet, maar nog niet zijn afgemaakt, geselecteerd zijn. Druk op **OK** om de afname van alle tests te starten. De cliënt krijgt alle klaargezette en geselecteerde tests één voor één aangeboden.

De knop **Afname** slaat de selectie mogelijkheid over, alleen de test weergegeven in de status balk wordt direct gestart.

Het invullen van een test begint altijd met de presentatie van een instructie over die test. Nadat op de boven die instructie getoonde knop "Start test" wordt geklikt, wordt de eerste vraag gepresenteerd die nog beantwoord moet worden. Een in een vorige sessie afgebroken test, wordt dus hervat op het punt waar gestopt was.

Indien meer dan één test wordt aangeboden, krijgt de cliënt het volgende scherm:



Hierna start de volgende tests. Nadat de test is afgesloten verschijnt het volgende scherm:



De testleider kan dus zien of de test is afgerond of halverwege afgebroken. Door op **Login** te drukken verschijnt het inlog scherm, waarmee de testleider weer in het hoofdscherm kan terugkomen.

Na de afname is het mogelijk om van iedere test het rapport te bekijken.

Rondleiding: Internet afname

U kunt ook tests afnemen op iedere PC op uw Intranet of Internet zonder dat op die PC Datec Score Manager geïnstalleerd hoeft te zijn. De afname gaat via onze beveiligde web site <https://www.testmij.nl>. Datec kan ook andere locaties met u afspreken, bijvoorbeeld <https://uwbedrijf.testmij.nl> of uw eigen Intranet.

Als u net een test hebt klaargezet is deze nog geselecteerd. Selecteer anders een test door op de regel met de juiste test te klikken.

Testmij kan namens u een email sturen naar de cliënt, maar u kunt ook Datec Score Manager een schriftelijke uitnodiging laten afdrucken.

Met de knop Internet geeft u aan dat de test op Internet moet worden afgenomen.

U krijgt dan het volgende scherm te zien:

Controleer de achtergrond gegevens, die gebruikt worden voor statistiek. Vul een gebruikerslogin in voor deze cliënt. De cliënt gebruikt deze login in combinatie met een unieke Sessie Code om zich te identificeren op de web site. Het is handig als u aan de hand van de gebruikerslogin de cliënt kunt herkennen.

Als u wilt dat de web site de uitnodiging voor u verstuurt zet dan het vinkje en vul het email adres in. U kunt ook een uitnodiging afdrukken, dan hoeft u geen email adres in te voeren.

Als u de uiterste datum invult wordt de cliënt gevraagd voor deze datum de test af te ronden.

Vul tot slot uw eigen email adres in. Zodra de cliënt de vragenlijst heeft ingevuld krijgt u een email. Bij de eerst volgende keer dat u Datec Score Manager start worden de antwoorden automatisch opgehaald. U kunt direct het rapport opvragen. Uw email adres wordt niet aan de cliënt getoond.

Druk op de knop **Zet op Internet** om de web site op de afname voor te bereiden.

Rondleiding: Rapport bekijken

Nadat (een gedeelte) van een test is gedaan, is het mogelijk het rapport van de test te bekijken.

De knoppenbalk ziet er nu als volgt uit:



De **Afname** en de **Test Batterij** knoppen zijn in dit voorbeeld niet meer geactiveerd. De **Afname** knop is alleen actief als de geselecteerde test nog niet is ingevuld. De **Test Batterij** knop is alleen actief als er nog minstens één test voor deze cliënt is die nog niet is ingevuld.



De **Bekijk** afdruk knop is nu geactiveerd. Met behulp van deze knop, of door het menu **Rapport, Bekijk rapport...**, kunt u het rapport opstellen en op het scherm bekijken.

Via het menu is het mogelijk te kiezen voor welke test sessie het rapport gemaakt moet worden, terwijl de knop altijd de laatste kiest. Via het menu is het ook mogelijk een ander rapport type te kiezen, of de norm groep te wijzigen.

Het rapport kunt u op het scherm bekijken. Blader naar andere pagina's met **Volgende** en **Terug**.



Met de **Bewerk** knop, of door het menu **Rapport, Bewerken...** kunt u het rapport direct in uw tekstverwerker opvragen.

Let op: Indien u het rapport wilt wijzigen, sla het dan op onder een andere naam. Het originele rapport wordt de volgende keer dat u een rapport opvraagt overschreven.



Met behulp van de **Afdrukken** knop, of met behulp van het menu **Rapport, Afdrukken...** kunt u het rapport afdrukken op uw printer.

2 Beheer

2.1 Overzicht

Het programma heeft een aantal beheersfuncties. Deze functies zijn vooral bedoeld om in te stellen hoe u de Datec Score Manager wilt gebruiken.

De beheersfuncties zijn alle beschikbaar onder het **Beheer** menu. Dit menu is alleen beschikbaar indien u gehele of gedeeltelijke beheersrechten heeft. Sommige beheersfuncties zijn alleen beschikbaar in de Professional versie.

In dit hoofdstuk worden alleen de meest essentiële beheersfuncties besproken. Raadpleeg de online hulp voor de overige beheersfuncties.

Bronnen

Het sub menu Bronnen is bedoeld om diverse bronnen te beheren:

- Met het **Gebruikers** sub menu kunt u aangeven welke gebruikers (testleiders) de Datec Score Manager mogen gebruiken en wat hun rechten zijn.
- Met behulp van het **Afdelingen** sub menu kunt u afdelingen of organisaties ingegeven. Veel organisaties zullen de Datec Score Manager maar met één afdeling gebruiken. In dat geval kiest u hier de naam van uw bedrijf of organisatie. Het is ook mogelijk om meerdere afdelingen in te geven, en de testleiders in te delen in afdelingen. Testleiders kunnen wel de cliënt gegevens en afdelingen van andere testleiders binnen hun eigen afdeling inzien, maar niet die van andere afdelingen.

Database Opschonen

Wanneer u gegevens wist wordt de ruimte niet direct vrijgegeven uit de database. Om de database op te schonen kiest u de functie Compact Database. Dit is echter alleen mogelijk indien er op dat moment geen andere gebruikers van de Datec Score Manager aanwezig zijn. Het programma controleert dit en waarschuwt de beheerder op welke PC een gebruiker de Datec Score Manager nog heeft open staan.

Portefeuille

Het sub menu **Portefeuille** wordt gebruikt om de portefeuille te onderhouden. De Datec Score Manager verrekend het gebruik van tests bij de afname en bij de rapportage. De beheerder maakt met

behulp van de Portefeuille functie een bestel bestand dat via email of floppy naar Datec wordt gestuurd. Datec stuurt een krediet bestand terug dat met de portefeuille functie wordt ingelezen. Het krediet wordt centraal beheerd en voor alle tests gebruikt.

2.2 Test Beheer

Het **Beheer, Test** sub menu wordt gebruikt om *testbatterijen* samen te stellen. De beheerder kan:

Standaard programma waarden voor tests bepalen

Met behulp van deze functie kunnen de standaard waarden bepaald worden, waardoor de testleider deze niet iedere keer zelf hoeft te kiezen. Het bepalen van standaard waarden vermindert de kans op fouten. De beheerder kan de volgende waarden bepalen:

- In welke volgorde de tests gepresenteerd worden
- Welke norm groep als standaard waarde gekozen wordt
- Welk rapport standaard bij een test gekozen wordt

Bepalen welke tests beschikbaar zijn.

Alleen *actieve* tests worden aan de testleider gepresenteerd bij het klaarzetten van een nieuwe test. Als een test een of meerdere keren gebruikt is kan een test niet verwijderd worden, omdat daarmee de cliënt informatie verloren zou gaan. Wel kunt u een test op *non-actief* stellen. Een niet actieve test wordt niet meer aangeboden in het keuze menu voor nieuwe test sessies.

Nieuwe Test Modules in de database laden

U kunt tests in de database laden. Optionele tests kunnen met de installatie zijn klaargezet of van de Datec web site (www.datec.nl) gedownload worden. Bij het downloaden kiest u voor **uitvoeren**. Na het uitvoeren kunt u de test laden met **Beheer, Test, Test Modules Laden**.

Kies een of meer tests uit het menu.

Let Op: als u een test laad worden de wijzigingen die u op de rapporten hebt gemaakt ongedaan gemaakt.

U kunt de test pas gebruiken nadat u van Datec de autorisatie hebt verkregen. De autorisatie verkrijgt u door een bestel bestand aan te maken met de Bestel Wizard en dit bestand naar Datec te sturen.

2.3 Beheer: Database Opschonen

De gebruikte Microsoft Access database voegt tijdens het gebruik wel gegevens toe, maar geeft gebruikte informatie van verwijderde gegevens niet vrij.

Daarom is het noodzakelijk nadat het programma enige tijd is gebruikt om de database op te schonen. Na het opschonen neemt de database veel minder ruimte in dan daarvoor.

Kies **Beheer, Database Opschonen** om de database te compacten. Datec Score Manager wordt gestopt en een aparte Database Opschonen wizard wordt gestart.

De wizard controleert eerst of u de enige gebruiker van Datec Score Manager bent. Als dit niet het geval is laat de wizard u een lijst zien van PCs waar Datec Score Manager gestart is. U kunt alleen de database opschonen als verder niemand is ingelogd.

Als eerste vraagt de wizard u of u de prullenbak wilt legen. De prullenbak bevat cliënt gegevens die door de testleiders zijn verwijderd. Na het legen van de prullenbak kunnen deze niet langer worden teruggehaald, en kan de ruimte worden vrijgegeven door de database te compacten. U kunt het legen van de prullenbak desgewenst overslaan.

Vervolgens start de wizard het opschonen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van de database en de snelheid van het netwerk.

Let op: Onderbreek het opschonen niet!

Het opschonen gebeurt door het maken van een kopie van de gegevens in een nieuwe database. Nadat dit geslaagd is wordt de oude database automatisch verwijderd.

Gegevens beveiliging

Database

De gegevens van de Datec Score Manager worden bewaard in een database. Deze database is met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden de voornaam, achternaam, en de testleider wachtwoorden versleuteld bewaard, zodat zelf mensen met toegang tot de database deze gegevens niet kunnen raadplegen.

Gegevens zekerstellen (Backup)

De gegevens van Datec Score Manager worden bewaard in een database, Score.mdb. De behandel plannen worden bewaard in een aparte database, Plan.mdb Het wordt aangeraden om deze dagelijks zeker te stellen op een reserve kopie.

De elektronische portefeuille is opgenomen in het bestand wallet.mdb. U zult begrijpen dat het niet is toegestaan een reserve kopie van de portefeuille terug te plaatsen, omdat dit een juiste administratie van de gebruiksgegevens in gevaar zou brengen.

Let op 1: plaats nooit een kopie van de portefeuille (wallet.mdb) terug, dit maakt de portefeuille ongeldig. Het programma kan alleen na tussenkomst van Datec geactiveerd worden.

Let op 2: de registratie van de portefeuille is gekoppeld aan de harde schijf en de computer waarop hij geplaatst is. Kies de plaats dus zorgvuldig! U kunt de schijf niet achteraf wijzigen.

Let op 3: De databases horen bij elkaar. De drie bestanden horen altijd in dezelfde directory te blijven staan.

2.4 Portefeuille

Overzicht Portefeuille

De Portefeuille wordt gebruikt voor het registreren van het gebruik van Datec Score Manager, het registreren van het gebruik van een test en voor het bewaren van het krediet.

Per afname van een test en voor het opstellen van rapporten wordt een vergoeding in rekening gebracht. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de test.

De afname vergoeding wordt in rekening gebracht op het moment dat een test voor een cliënt wordt klaargezet. Dit betekent dat het niet uitmaakt of een test online wordt afgenomen, of dat een test wordt afgedrukt en daarna met de Pen & Papier module de antwoorden worden overgenomen.

De rapport vergoeding wordt in rekening gebracht op het moment dat de eerste keer een rapport wordt opgesteld. Voor het opstellen van extra rapporten voor een test sessie wordt niets extra's in rekening gebracht. Daardoor is het mogelijk verschillende types rapporten te kiezen en verschillende norm groepen te gebruiken voor de rapportage.

Let op: Nadat betaling plaats heeft gevonden, wordt er rechtsonder in de statusbalk gedurende enkele seconden het betalings bedrag in Euro getoond, om de gebruiker te attenderen op de betaling.

Na de betaling wordt de nieuwe inhoud van de portefeuille in Euro's getoond.

Let op: na het wijzigen van de antwoorden wordt het eerstvolgende rapport opnieuw in rekening gebracht, omdat dit gezien wordt als een andere test sessie.

Registratie Datec Score Manager

Na installatie van Datec Score Manager is het noodzakelijk de portefeuille te registreren en het krediet op te waarderen. U hoeft dit maar één keer te doen per portefeuille. U kunt de Datec Score Manager cliënt software op meerdere PCs installeren en gezamenlijk van één portefeuille gebruik maken. Wel dient u over voldoende cliënt PC gebruikslicenties te beschikken.

Alle PCs die gezamenlijk een portefeuille gebruiken maken gezamenlijk gebruik van hetzelfde krediet in de portefeuille.

Het registreren van de portefeuille en het opwaarderen van het krediet gebeurt op dezelfde wijze. Via de tab **Bestel Wizard** kunt u een bestel bestand aan maken. Het bestel bestand stuurt u automatisch via Internet, of handmatig met email of op floppy naar Datec. Van Datec ontvangt u een krediet bestand. Via de **Ontvang** tab kunt u het krediet bestand inlezen.

De portefeuille heeft vier tabs:

Product. Gebruik de Product Tab om de status van uw portefeuille te bekijken. Hier kunt u zien hoeveel krediet er nog in de portefeuille aanwezig is.

Prijzen. Gebruik de Prijzen Tab om de bekijken hoeveel iedere test kost.

Bestel Wizard. Op de Bestel Wizard Tab kunt u de Bestel Wizard starten om een bestand aan te maken dat u naar Datec verstuurt voor registratie en bestellen van krediet in de portefeuille.

Ontvang. Gebruik de Ontvang Tab om een ontvangen krediet bestand in te lezen in de portefeuille.

Portefeuille - Product tab

Gebruik de Product tab om de status van uw portefeuille te bekijken. Hier kunt u zien hoeveel krediet er nog in de portefeuille aanwezig is.

Deze tab bevat de volgende velden

Portefeuille ID Uniek nummer van uw portefeuille.

Product ID De product ID krijgt u van Datec ten teken dat u voor het gebruik van de portefeuille betaald hebt. Als de Product ID nog niet bekend is werkt de Datec Score Manager in demo mode.

Serienummer Het serienummer van uw installatie. Geef dit desgevraagd aan Datec.

Nog in portefeuille Het krediet dat nog in de portefeuille aanwezig is.

Waarschuwing Wanneer de inhoud van de portefeuille beneden dit bedrag belandt, wordt de testleider bij iedere afname van het krediet gewaarschuwd zodat u tijdig krediet kunt bestellen. Zet dit bedrag hoog genoeg om u in staat te stellen het nieuwe krediet tijdig in huis te hebben.

Portefeuille - Prijzen Tab

Gebruik de Prijzen tab om de bekijken hoeveel iedere test kost.

De prijzen tab heeft de volgende velden:

Test selectie Kies een test uit de lijst, waarvan u de prijzen wilt zien

Test Sessie prijs Bij het klaarzetten van de test wordt deze prijs berekend. Daarna kunt u de test meerdere keren afdrukken of afnemen voor één cliënt.

Rapport prijs Bij de eerste keer dat u een tabel rapport of rapport afdruk opvraagt wordt deze prijs in rekening gebracht. U kunt het rapport meerdere keren opvragen zonder meer kosten. Indien u echter de ingebrachte gegevens wijzigt (bijvoorbeeld met de P&P functie) dan wordt de volgende afdruk opnieuw in rekening gebracht.

Portefeuille - Gebruik Tab

Gebruik de Gebruik tab om de bekijken hoeveel tests u heeft afgenomen.

U ziet per jaar helft hoe vaak u iedere test heeft klaargezet. 2009-1 is dus de eerste helft van 2009, 2009-2 de tweede helft.

(Bij upgrade van een ouder release loopt de teller vanaf het moment van de upgrade).

Portefeuille - Bestel Wizard Tab

Gebruik de Bestel Wizard Tab voor het aanvragen van krediet en bestellen van licenties. De eerste bestelling dient tevens voor het registreren van de portefeuille.

Met behulp van de Bestel Wizard kunt u een diverse zaken bij Datec bestellen. De Bestel Wizard begeleidt u door het proces. U kunt zo de volgende bestellingen plaatsen:

- Licentie voor de portefeuille (éénmalige registratie)
- Licenties voor aangesloten PCs (bij netwerk gebruik)
- Licentie voor gebruik van tests (éénmalig per test per portefeuille)
- Krediet voor gebruik van tests en rapporten
- Schriftelijke versies van een tests (afhankelijk van beschikbaarheid)

Nadat u met **Bestel Wizard** de Wizard gestart heeft, leidt de wizard u door de verschillende stappen. U wordt gevraagd contact en factuur gegevens op te geven. Na het afsluiten van de wizard worden deze gegevens bewaard, zodat u die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

De wizard vraagt u alleen om relevante gegevens. Bijvoorbeeld nadat u de eerste keer de portefeuille heeft geregistreerd wordt u niet opnieuw gevraagd hoeveel licenties u wilt bestellen, tenzij u in de tussentijd meer PCs in gebruik heeft genomen.

Met de bestel wizard kunt u uw bestelling afdrukken voor uw eigen administratie, of voor uw inkoop proces. In de Bestel Wizard kunt u aangeven wat Datec met de order moet doen; meteen uitvoeren of wachten op een inkoop order. Indien uw organisatie met een inkoop order werkt, druk dan de bestelling af en vraag uw inkoop afdeling deze met de bestelling mee te zenden.

In de "Zet het order bestand klaar" fase van de wizard kunt u kiezen:

- Klaarzetten en versturen via Internet (aanbevolen)
- Klaarzetten en zelf versturen via email.

Als uw PC over een Internet verbinding beschikt kunt u het beste de eerste optie (via Internet) kiezen.

Klaarzetten en versturen via Internet

Druk op **Klaarzetten** om het order bestand te versturen en klaar te zetten voor verwerking door Datec.

Indien het klaarzetten via Internet niet mogelijk is, controleer dan of uw Internet verbinding in orde is. Controleer of de verbinding met Datec bestaat met de volgende URL: <http://service.datec.nl/test.htm>. Indien u deze URL niet kunt bereiken, probeer het dan later nogmaals.

U wordt gevraagd u email adres te bevestigen. Op dit email adres krijgt u een automatische bevestiging dat uw opdracht is ontvangen. Zodra de bestelling is verwerkt krijgt u een volgende email. Daarna kunt u met de Ontvang tab het krediet inlezen.

Klaarzetten en zelf versturen via email.

Klik op **Klaarzetten** om het order bestand te bewaren. Kies een voor u handige plaats om de order te bewaren, en schrijf deze plaats zorgvuldig op. Plaats het order bestand desgewenst direct op een floppy voor verzending naar Datec.

Aanbevolen wordt echter om het order bestand via email te versturen naar bestel@datec.nl. Maak een email aan en kies Bijlage toevoegen in uw email programma. Selecteer het bewaarde bestand als bijlage aan uw email en verstuur de email naar bestel@datec.nl.

Nadat u van Datec het krediet bestand ontvangt kunt u deze inlezen met de Ontvang tab.

(Automatisch) Verzenden gegevens

Bij het versturen van uw kredietbestand worden gegevens van uw

omgeving en uw gebruik meegestuurd. Deze informatie wordt verder ook maandelijks bij het opstarten van Datec Score Manager automatisch verstuurd:

- Informatie over de naam van uw PC, en de locatie van database
- Het aantal licenties dat gebruikt wordt
- Het gebruik van de tests
- Informatie over de portefeuille, o.a. het krediet dat nog beschikbaar is.

Deze informatie wordt gebruikt om u beter te kunnen ondersteunen en om auteursrechten af te kunnen dragen.

Portefeuille - Ontvang Tab

Nadat u van Datec via email of floppy een krediet bestand heeft ontvangen kunt u het met deze tab inlezen.

Ophalen via Internet:

Druk op **Open krediet bestand**. Het krediet bestand wordt via Internet opgehaald en ingelezen. Als er nog geen bestand voor u is klaargezet, krijgt u de melding "Er is geen bestand voor u klaargezet". U krijgt een email van Datec zodra het bestand is klaargezet.

Indien het ophalen van Internet niet mogelijk is, controleer dan of uw Internet verbinding in orde is. Controleer of de verbinding met Datec bestaat met de volgende URL: <http://service.datec.nl/test.htm>. Indien u deze URL niet kunt bereiken, probeer het dan later nogmaals.

Ophalen Email of Floppy bestand:

Bewaar het via Email ontvangen bestand op uw harde schijf, bijvoorbeeld op de Desktop.

Druk op **Open krediet bestand** om het krediet bestand te selecteren. Hierna wordt het automatisch ingelezen. Uw portefeuille wordt geregistreerd en de portefeuille opgewaardeerd.

U kunt een krediet bestand slechts één keer in lezen. Het nieuwe krediet wordt toegevoegd aan het al aanwezige krediet.

Let op: indien u twee krediet bestanden heeft, is het van belang de bestanden in de juiste volgorde in te lezen. U kunt een ouder krediet bestand niet meer gebruiken.

3 Installatie van Datec Score Manager

Om Datec Score Manager uit te proberen, of wanneer een installatie op slechts één PC is vereist, is het eenvoudig om Datec Score Manager standalone te installeren. De standaard test modules worden automatisch geïnstalleerd. Na installatie kunt u nog optionele test modules installeren. [Zie Standalone Installatie.](#)

Voor gebruik in een netwerk is een Netwerk installatie mogelijk. [Zie Netwerk Installatie.](#)

Er is maar één installatie pakket, voor de Demo, Datec Score Manager en de Datec Score Manager Professional. Het verschil in functionaliteit wordt na installatie bepaald door de licentie.

Na het installeren zijn er een paar handelingen nodig om het programma in te richten. [Zie Eerste keer starten.](#)

Voor het inrichten van procedures voor het zekerstellen van de test gegevens, [zie Gegevens zekerstellen \(Backup\)](#) en [Plaats van de bestanden.](#)

3.1 Installatie vereisten.

Datec Score Manager wordt ondersteund op de volgende Windows besturingssystemen:

- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Server 2003

De server bestanden kunnen op een Novell netwerk of Windows 2000/2003 server geplaatst worden. Datec Score Manager ondersteunt ook Terminal Server en Citrix op Windows 2000 of Windows 2003.

De installatie gebruikt (installeert) Microsoft Windows Installer 2.0, en Microsoft MDAC. MDAC is een update van Microsoft voor gebruik van databases. De update wordt volgens Microsoft voorschriften geïnstalleerd wanneer dat op het doelsysteem vereist is. Bij installatie van MDAC kan een reboot van het systeem vereist zijn.

De installatie van Datec Score Manager voldoet aan de Microsoft Logo eisen voor "Designed for Windows XP". Dit is geen garantie van Microsoft zelf, maar van Datec, dat wij het programma ontworpen en getest hebben volgens de richtlijnen van het Microsoft Logo.

3.2 Upgrade van Datec Score Manager versie 3

U kunt de upgraden van versie 2 door Datec Score Manager op iedere PC met versie 2 te installeren. Bij een server installatie wordt u aanbevolen eerst de oudere software te deinstalleren.

Bestaande gegevens.

Uw bestaande gegevens, zoals cliënt en test gegevens blijven bewaard na de upgrade.

Upgrade met netwerk installatie of niet standaard locatie database.

Wanneer u de database op een netwerk heeft geïnstalleerd, of op een niet standaard locatie, dient u bij de upgrade installatie voor **Aangepast** te kiezen. Selecteer het programma onderdeel "Database" en druk op **Wijzigen**. Kies nu de bestaande locatie voor de database.

Let op: Installeer met Aangepast, en kies de bestaande locatie voor de database. Wanneer u dit niet doet, zal de upgrade falen!

Typ bij voorkeur direct het UNC pad van de server schijf in, bijvoorbeeld \\Server\Deelschijf.

3.3 Standalone Installatie

Standalone installatie van Datec Score Manager

Om Datec Score Manager uit te proberen, of wanneer een installatie op slechts één PC is vereist, is het eenvoudig om Datec Score Manager standalone te installeren. De standaard test modules worden automatisch geïnstalleerd. Na installatie kunt u nog optionele test modules installeren.

Doe de CD in een CD-ROM speler. Indien uw CD-ROM speler op automatisch lezen staat afgesteld wordt de installatie automatisch gestart. Dit kan echter wel een minuut duren voordat de CD is ingelezen. Als uw CD-ROM speler niet op automatisch lezen staat afgesteld start u de installatie door **Setup.exe** te starten via de Windows explorer

Let Op: Bij installatie dient u over administratie rechten te beschikken.

Lees de licentie overeenkomst zorgvuldig door en geef aan of u er mee akkoord gaat.

Kies **Volledig** als installatie keuze. Dit installeert zowel de Datec Score Manager desktop software als de database en portefeuille.

Afhankelijk van uw Windows versie, kan het zijn dat u ook kunt kiezen voor een installatie voor alle gebruikers, dan wel alleen voor u zelf. In het algemeen is een installatie voor alle gebruikers aan te bevelen.

(Wel/Niet) Rebooten na installatie

Afhankelijk van uw Windows versie en geïnstalleerde software kan het noodzakelijk zijn om te rebooten. Allereerst wordt de Microsoft technologie voor installatie (Windows Installer) geïnstalleerd. In sommige gevallen is het daarna noodzakelijk direct te rebooten, waarna de installatie direct wordt hervat. De Windows Installer heeft vele voordelen boven de oudere technologie. Afhankelijk van eerder geïnstalleerde software worden de Microsoft Data Access Components geïnstalleerd. Als dit noodzakelijk is dan wordt de gebruiker aan het eind van de installatie gevraagd te rebooten.

De updates van de Windows Installer en Data Access Components zijn éénmalig. Bij latere installaties van bijvoorbeeld updates is het niet langer noodzakelijk te rebooten tijdens een installatie. De Windows Installer controleert of er een programma draait dat de onderdelen van Datec Score Manager gebruikt. Als dat zo is, wordt u gevraagd om deze applicatie(s) te stoppen. Wanneer u dat doet is een reboot aan het eind van de installatie niet meer nodig.

Standalone installatie van Datec Score Manager

Om Datec Score Manager uit te proberen, of wanneer een installatie op slechts één PC is vereist, is het eenvoudig om Datec Score Manager standalone te installeren. De standaard test modules worden automatisch geïnstalleerd. Na installatie kunt u nog optionele test modules installeren.

Doe de CD in een CD-ROM speler. Indien uw CD-ROM speler op automatisch lezen staat afgesteld wordt de installatie automatisch gestart. Dit kan echter wel een minuut duren voordat de CD is ingelezen. Als uw CD-ROM speler niet op automatisch lezen staat afgesteld start u de installatie door **Setup.exe** te starten via de Windows explorer

Let Op: Bij installatie dient u over administratie rechten te beschikken.

Lees de licentie overeenkomst zorgvuldig door en geef aan of u er mee akkoord gaat.

Kies **Volledig** als installatie keuze. Dit installeert zowel de Datec Score Manager desktop software als de database en portefeuille.

Afhankelijk van uw Windows versie, kan het zijn dat u ook kunt kiezen voor een installatie voor alle gebruikers, dan wel alleen voor u zelf. In het algemeen is een installatie voor alle gebruikers aan te bevelen.

(Wel/Niet) Rebooten na installatie

Afhankelijk van uw Windows versie en geïnstalleerde software kan het noodzakelijk zijn om te rebooten. Allereerst wordt de Microsoft technologie voor installatie (Windows Installer) geïnstalleerd. In sommige gevallen is het daarna noodzakelijk direct te rebooten, waarna de installatie direct wordt hervat. De Windows Installer heeft vele voordelen boven de oudere technologie. Afhankelijk van eerder geïnstalleerde software worden de Microsoft Data Access Components geïnstalleerd. Als dit noodzakelijk is dan wordt de gebruiker aan het eind van de installatie gevraagd te rebooten.

De updates van de Windows Installer en Data Access Components zijn éénmalig. Bij latere installaties van bijvoorbeeld updates is het niet langer noodzakelijk te rebooten tijdens een installatie. De Windows Installer controleert of er een programma draait dat de onderdelen van Datec Score Manager gebruikt. Als dat zo is, wordt u gevraagd om deze applicatie(s) te stoppen. Wanneer u dat doet is een reboot aan het eind van de installatie niet meer nodig.

Plaats van de bestanden

De desktop software wordt in uw programma bestanden directory geïnstalleerd, onder de "Datec Score Manager" subdirectory.

De gedeelde software (o.a. de databases) wordt in een door Microsoft voorgeschreven plaats geïnstalleerd, die afhankelijk is van uw operating systeem, in de Datec\Score Manager subdirectory van de CommonAppData directory. De plaats van de CommonAppData directory is afhankelijk van de versie van Windows. Het programma wordt automatisch op de juiste plaats geïnstalleerd en na installatie weet Datec Score Manager waar de database staat.

U kunt de plaats van de database opvragen met **Hulp, Info Datec Score Manager**.

- Microsoft Windows XP: \Document and Settings\All Users\Application Data\Datec\Score Manager
- Microsoft Vista en Microsoft Windows 7: \Program Data\Datec\Score Manager

Let op 1: de registratie van de portefeuille is gekoppeld aan de harde

schijf en de computer waarop hij geplaatst is. Kies de plaats dus zorgvuldig! U kunt de plaats later niet wijzigen.

Let op 2: de portefeuille (wallet.mdb), de gegevens database (score.mdb) en de behandelplan database (plan.mdb) horen bij elkaar. De score.mdb en plan.mdb databases kunt u wel zeker stellen, en desgewenst terugplaatsen. De wallet.mdb kunt u niet terugplaatsen. De twee bestanden horen altijd in dezelfde directory te blijven staan.

3.4 Netwerk of Citrix Installatie

Netwerk Installatie

Datec Score Manager bestaat uit een desktop deel en een server (database) deel.

Bij een netwerk installatie is het mogelijk de server componenten met meerdere gebruikers te delen.

De server componenten bevatten:

- De database met cliënt gegevens en test sessies
- De portefeuille
- De behandelplannen
- Test distributie componenten

U kunt de Datec Score Manager desktop op meerdere PCs installeren, die alle gebruik maken van dezelfde server componenten.

Op deze wijze kunnen testleiders op meerdere PCs de gegevens invoeren, wijzigen of test afnemen. Ook kunt u een of meer speciale test PCs inrichten, waar cliënten eventueel zelf mogen in loggen en een test af kunnen nemen. De testleider kan op de eigen PC de test klaar zetten, en naderhand het rapport opstellen.

Installatie van de server componenten

De server componenten worden éénmalig op een gedeelde netwerk schijf geplaatst. Dit kan ieder type netwerk zijn, zoals Windows, Novell of Unix, zolang het netwerk maar door de PCs benaderd kan worden. De netwerk schijf kan via een UNC pad naam benaderd worden (\\server\deelnaam) en hoeft niet via een schijf letter benaderd te worden.

Let op 1: de registratie van de portefeuille is gekoppeld aan de harde schijf en de computer waarop hij geplaatst is. Kies de plaats dus zorgvuldig!

Let op 2: de portefeuille (wallet.mdb), de gegevens database (score.mdb) en de behandelplan database (plan.mdb) horen bij elkaar. De score.mdb en plan.mdb databases kunt u wel zeker stellen, en desgewenst terugplaatsen. De wallet.mdb kunt u niet terugplaatsen. De twee bestanden horen altijd in dezelfde directory te blijven staan.

Desktop installatie

Na installatie van de server componenten en het instellen van de rechten ([zie installatie server componenten](#)) kunt u de desktop op iedere PC installeren. De desktop moet weten waar de server component staan. Dit kunt u opgeven bij de installatie van de desktop.

Netwerk Installatie

Datec Score Manager bestaat uit een desktop deel en een server deel.

Bij een netwerk installatie is het mogelijk de server componenten met meerdere gebruikers te delen.

Installatie van Server Componenten

U kunt de server componenten via het programma installeren, of door de componenten te kopiëren naar de server. Daarna is het noodzakelijk om eenmalig de benodigde *Test Modules* te installeren

Installatie via het programma

U kunt de server componenten installeren door Datec Score Manager op uw PC te installeren. Kies **Aangepast** als u gevraagd wordt welke installatie u wilt. Kies Database en selecteer de schijf waar de server componenten moeten komen te staan. Typ bij voorkeur direct het UNC pad van de server schijf in, bijvoorbeeld \\Server\Deelschijf.

Het voordeel van deze installatie wijze is dat u het programma direct van uw PC kunt gebruiken, en u zelf als beheerder kunt aanmelden. Zodra u het programma start worden eerst alle tests in de database geplaatst. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van het aantal tests en de snelheid van het netwerk.

Laden van Test Modules in de database

Voor het afnemen van tests zijn test modules vereist. Na installatie van het programma wordt de kennismakingstest (KMT) automatisch in de database geladen bij het starten van Datec Score Manager.

U kunt meer test modules in de database laden met behulp van het menu **Beheer, Test, Test Module Laden**. Kies een test module uit de lijst of druk op Selecteer Alle. Druk op **Laden** om de geselecteerde tests in de database te laden.

De gekozen test modules worden nu in de database gekopieerd.

Wanneer u Datec Score Manager niet op uw PC geïnstalleerd heeft (U heeft bijvoorbeeld alleen de server componenten naar een gedeelde schijf gekopieerd), dan kunt u de tests ook laden via het **DSMTestLoader.exe** programma. Het laden gaat dan veel sneller dan als dit via een op het netwerk aangesloten PC gestart wordt.

Start het programma **DSMTestLoader.exe** en kies de tests die u wilt gebruiken in de dialoog. Druk op Laden. Hierna worden alle geselecteerde tests in de database geplaatst.

Zetten van Rechten

Gebruikers moeten lees en schrijf recht hebben op de Score.mdb, Plan.mdb en Wallet.mdb bestanden. Bij het kopiëren vanaf de CD-ROM worden deze bestanden op alleen-lezen gezet. Klik het bestand aan met de rechter muis knop. Kies Eigenschappen. In de tab haalt u het vinkje bij Alleen Lezen weg.

Afhankelijk van het operating systeem van uw netwerk server kunnen de rechten door de netwerk beheerder nog verder worden aangegeven. Noodzakelijk zijn lees en schrijfrecht. Het wijzig recht of volledige controle is niet nodig en kan beter uitgezet worden. Hierdoor kunnen de gebruikers de bestanden niet wissen.

Installatie van de Desktop Componenten

Nadat u de server componenten geïnstalleerd hebt, kunt u de desktop installeren op alle aangesloten desktops.

Let Op: Bij installatie van de desktop componenten op Windows NT, 2000 of XP dient u over administratie rechten te beschikken.

Aangepaste installatie met keuze van het doelpad voor de database

Start de installatie en kies "**Aangepast**". Kies Database en druk op **Wijzigen**. Kies het pad waar de server componenten geïnstalleerd staan. Kies een UNC pad, bijvoorbeeld \\server\deelschijf, in plaats van een schijf letter te gebruiken. Op deze wijze weet u dat de server componenten altijd beschikbaar zijn, ook als de gebruiker de schijf letter verwijderd. De portefeuille (Wallet.mdb) en de databases (score.mdb, plan.mdb) worden nooit overschreven bij een herinstallatie.

Windows Beveiligde Omgeving

Datec Score Manager ondersteunt de Microsoft Windows beveiligde omgeving. Datec Score Manager voldoet aan de Microsoft aanbevelingen voor deze omgevingen.

De installatie dient te geschieden onder Administratie rechten.

Tijdens het gebruik van Datec Score Manager zijn geen bijzondere rechten noodzakelijk. Het programma schrijft alleen tussenresultaten (bijvoorbeeld het rapport) in de gebruikersafhankelijke tijdelijke directory.

Ook wordt alleen geschreven naar Registry delen waar de gebruiker schrijf recht op heeft. Voor sommige settings is het handiger deze te delen met andere gebruikers, en het programma tracht deze te schrijven in HKEY_LOCAL_MACHINE. Als dit niet is toegestaan, worden deze settings automatisch in HKEY_CURRENT_USER geschreven.

3.5 Licenties

Datec Score Manager kent twee type licenties:

- Netwerk licentie: U heeft één licentie nodig per PC waarop het programma gebruikt wordt.
- Terminal Server licentie (Citrix): U heeft één licentie nodig per gebruiker, ongeacht het aantal servers in de configuratie.

Er zijn ook groepslicenties beschikbaar. Zie <http://www.datec.nl/dsm> voor details.

3.6 Datec Score Manager voor de eerste keer starten

Na installatie van het programma start u Datec Score Manager via de icoon op uw desktop of via het start menu.

De-installatie van de software kan via het Configuratie paneel, Software.

Beheerder

De eerste gebruiker wordt automatisch beheerder van de installatie. U kunt later andere gebruikers aanwijzen als beheerder. Kies een login naam en een vertoonde naam.

Let op: onthoudt de naam en wachtwoord van de beheerder. Zonder deze kunt u het programma niet meer gebruiken!

Kies de login naam gelijk aan uw Windows login naam, hierdoor wordt deze naam steeds automatisch voor u gekozen. Geef u volledige (voor en achternaam) in bij vertoonde naam. Typ uw wachtwoord twee maal in.

Tot de functie van de beheerder in Datec Score Manager behoren de volgende taken:

- Beheer van bronnen, zoals gebruikers, afdelingen, (norm) groepen en behandel plannen.
- Aanmaken van nieuwe testbatterijen en rapporten
- Bestellen van test modules en krediet.
- Compacten van de database.

Omdat dit geen IT gerelateerde zaken zijn, wordt deze taak vaak bij één of meer van de psychologen gelegd.

Registratie/Laden

U kunt nu kiezen voor gebruik, laden of voor registratie. Totdat u het programma registreert gelden er enige beperkingen in het gebruik.

Voor het afnemen van tests zijn test modules vereist. Kies eerst voor Laden om de test modules te selecteren die u eventueel gaat gebruiken. De vragen en norm schalen van de geselecteerde tests worden dan in de database geladen.

Kies daarna voor **Registratie** om de portefeuille te registreren. De registratie gebeurt door het opsturen van een registratie bestand naar Datec, en het inlezen van een krediet bestand dat u per email ontvangt.